



FAMILLE REGIA

LITS DE SOINS À MULTIPLES FACETTES POUR HAUTES EXIGENCES



Avantages

- Finition raffinée et de qualité
- Lit hyper-bas, hauteur d'entrée de lit : 26cm
- Choix entre plusieurs designs de panneaux et des finitions en tissu et similicuir
- Détails techniques
 - Déplacement du dossier avec point de pivot virtuel pour empêcher de glisser vers le bas
 - Système de frein central
 - Roues cachées
- Basse tension 24V
- Barrières de sécurité continues pour une sécurité optimale ou barrières de sécurité Mobiflex pour plus de flexibilité.
 - Hauteur : 43 cm (hauteur de sécurité -22cm = épaisseur de matelas maximale 21cm)
- Charge de travail sécurisée haute, adapté aux patients plus lourds.
- Télécommande avec possibilité de bloquer les fonctions individuellement
- Sommier en quatre parties pour plus de confort
 - Réglage électriquement en hauteur de 26 à 80 cm.
 - Dossier réglable électriquement
 - Plicature des genoux réglable électriquement
- Réglage des jambes manuel grâce à une crémaillère
- Lit hybride
- Position fauteuil
 - Le déplacement complet du sommier permet de créer une position fauteuil complète
- Large choix d'options et d'aménagements



Particularités

- Sommier en quatre parties, dimensions 90x200cm
- Déplacement en hauteur 26-80cm
- Hauteur, dos et cuisses réglables électriquement
- Point de pivot virtuel
- 24 Volt
- Position fauteuil grâce à la position anti-Trendelenburg
- Charge de travail sécurisée 225kg – poids maximal du patient : 190kg
- Roues cachées et frein semi-central
- Habillage barrières de sécurité en hêtre naturel
- Potence avec poignée standard incluse

Design des panneaux

- Panneaux Primus (panneau de tête avec dessus en bois massif, panneau de pied avec barre de maintien en bois massif)
- Panneaux Primus low (panneaux tête et pied avec barre de maintien en bois massif, panneau de pied réduit en hauteur (uniquement en combinaison avec les barrières Mobiflex))
- Panneaux Nobla (panneaux tête et pied rectangulaires et rembourrés (uniquement en combinaison avec les barrières Mobiflex))
- Panneaux Nobla reha (panneaux tête et pied rectangulaires et rembourrés, panneau de pied réduit en hauteur (uniquement en combinaison avec les barrières Mobiflex))
- Panneaux Prinzino (panneaux tête et pied avec barre de maintien en bois massif)



Variantes

- Regia 100
 - Sommier 100x200cm
- Regia sans barrières
- Regia avec barrières continues
- Regia avec 2 barrières scindées Mobiflex en tête du lit
- Regia avec 4 barrières scindées Mobiflex





Barrières de sécurité

- Regia sans barrières
 - Profitez de tous les avantages d'un lit électrique sans l'aspect d'un lit de soins
 - Finition en décor de bois ou rembourré



- Regia avec barrières continues
 - Sécurité maximale grâce aux barrières continues en une partie



- Regia avec 2 barrières scindées Mobiflex en tête du lit
 - Cette exécution offre beaucoup de confort, sécurité et mobilité à l'utilisateur
 - Les barrières sont uniquement pourvues en tête du lit et répondent aux normes en longueur de 110cm
 - Finition en décor de bois ou rembourré



- Regia avec 4 barrières scindées Mobiflex
 - Cette exécution offre beaucoup de confort, sécurité et mobilité à l'utilisateur
 - Les barrières sont pourvues en tête et au pied du lit : combinaison des éléments de 90cm et 110cm au choix
 - Finition des panneaux en décor de bois ou rembourrés




Modulair design – Easy switch

Choisissez votre Regia avec les barrières de sécurité scindées Mobiflex ou sans barrières et bénéficiez du système flexible Easy Switch. Le principe de l'Easy Switch est aussi simple qu'impressionnant : Les barrières de sécurité Mobiflex, les panneaux de tête et de pied et les panneaux latéraux peuvent être fixés et retirés sans outils. Cela est possible grâce à des crochets de fixation faciles à utiliser qui s'enclenchent solidement et ne peuvent pas être ouverts accidentellement par l'utilisateur.



Grâce au système Easy Switch, vous pouvez facilement équiper le Regia de barrières de sécurité à tout moment ou créer un nouveau look pour répondre à vos besoins. Ce sera un lit qui se développera avec vous et vous soutiendra à chaque étape de votre vie. Les panneaux latéraux amovibles et les panneaux latéraux peuvent être rapidement convertis à toute situation de soins. Ils facilitent aussi considérablement le montage du lit.

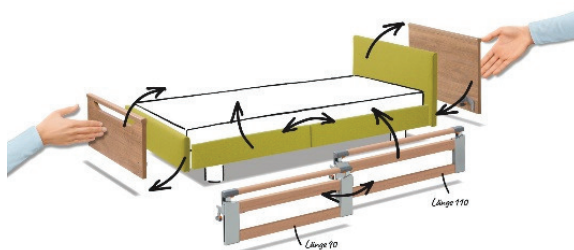


Tous les éléments Easy Switch sont faciles à fixer au lit.



Poussez le fermoir vers le haut.



L'attache s'enclenche solidement et l'élément est fixé au lit.

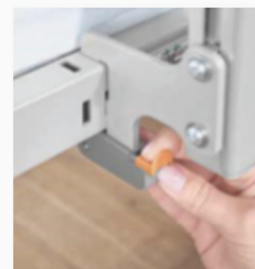

Pour déverrouiller l'attache, tirez l'attache de sécurité orange vers vous et appuyez vers le bas.

Options et accessoires

- Décor bois en érable, cerisier, havanna ou chêne lindberg
- Panneaux de tête et de pied et panneaux latéraux rembourrés :
 - Tissu : vert, orange, rouge
 - Similicuir : blanc, anthracite
- Rallonge télescopique de 20 ou 27 cm
- Eclairage sous le lit
- Sommier confort
- Porte-draps
- Position Trendelenburg sur une autre télécommande.
- Ecarteur de mur
- Grandes roues (100mm), Movo



Numéros d'article

BBREG-P-DO	Regia – 24V – avec barrières continues – sommier 90x200cm – panneaux Primus
BBREG-PR-DO	Regia – 24V – avec barrières continues – sommier 90x200cm – panneaux Prinzino
BBREG-PL-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 90x200cm – panneaux Primus low
BBREG-PR-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 90x200cm – panneaux Prinzino
BBREG-N-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 90x200cm – panneaux Nobla
	Panneaux de tête et de pied de lit rembourrés: couleur au choix



BBREG-NR-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 90x200cm – panneaux Nobla reha Panneaux de tête et de pied de lit rembourrés: couleur au choix
BBREG-PL-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 90x200cm – panneaux Primus low
BBREG-PR-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 90x200cm – panneaux Prinzino
BBREG-N-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 90x200cm – panneaux Nobla Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix
BBREG-NR-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 90x200cm – panneaux Nobla reha Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix
BBREG-PL-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 90x200cm – panneaux Primus low
BBREG-PR-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 90x200cm – panneaux Prinzino
BBREG-N-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 90x200cm – panneaux Nobla panelen Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix
BBREG-NR-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 90x200cm – panneaux Nobla reha Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix
BBREG100-P-DO	Regia – 24V – avec barrières continues – sommier 100x200cm – panneaux Primus
BBREG100-PR-DO	Regia – 24V – avec barrières continues – sommier 100x200cm – panneaux Prinzino
BBREG100-PL-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 100x200cm – panneaux Primus low
BBREG100-PR-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 100x200cm – panneaux Prinzino
BBREG100-N-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 100x200cm – panneaux Nobla Panneaux de tête et de pied de lit rembourrés: couleur au choix
BBREG100-NR-4MF	Regia – 24V – avec 4 barrières Mobiflex – sommier 100x200cm – panneaux Nobla reha Panneaux de tête et de pied de lit rembourrés: couleur au choix
BBREG100-PL-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 100x200cm – panneaux Primus low
BBREG100-PR-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 100x200cm – panneaux Prinzino
BBREG100-N-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 100x200cm – panneaux Nobla Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix
BBREG100-NR-2MF	Regia – 24V – avec 2 barrières Mobiflex en tête du lit – sommier 100x200cm – panneaux Nobla reha Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix
BBREG100-PL-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 100x200cm – panneaux Primus low
BBREG100-PR-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 100x200cm – panneaux Prinzino
BBREG100-N-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 100x200cm – panneaux Nobla Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix
BBREG100-NR-HOTEL	Regia – 24V – sans barrières – sommier 100x200cm – panneaux Nobla reha Panneaux de tête et de pied de lit et panneaux latéraux rembourrés: couleur au choix