

# Toebehoren

Clinic | **Care** | Assist



Niets is beter dan het origineel:  
**ACCESSOIRES** van Stiegmeyer.



**ORIGINELE ACCESSOIRES in originele kwaliteit.  
Modulair opgebouwd.**

Wij van Stiegmeyer zien onszelf niet alleen als beddenfabrikant maar meer als systeemaanbieder in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg wordt steeds specialistischer, waardoor er continu andere eisen aan de producten worden gesteld.

Daarom hechten wij veel waarde aan een modulair productassortiment dat perfect kan worden afgestemd op de eisen van uw dienstverlening.

## INHOUD

- 03 Valpreventiemiddelen
- 04 Bedverlengingen
- 08 Beschermende bekledingen
- 10 Papegaaien met accessoires
- 12 Lampen
- 14 Extra uitrusting Mobiliteit
- 16 Extra uitrusting Medisch
- 18 Transport en bediening
- 20 Comfort en gezelligheid
- 22 Accessoires voor het nachtkastje

# Safety First: Alles voor valpreventie

Vallen duurt maar een fractie van een seconde – de gevolgen zijn echter vaak veel langduriger voor bewoners en juridisch gezien onaangener voor de verantwoordelijke dienstverlener. Valpreventiemiddelen worden gebruikt om letsel te voorkomen zonder dat de bewegingsvrijheid hierbij al te zeer wordt beperkt.


De Stiegmeyer-opvangmat van stevig kunstleer met schuimrubberen voering (grote afbeelding), bevestigd aan de beschermingsbalk aan de zijkant van het bed. Als de mat niet wordt gebruikt, kan deze gewoon omhoog worden geklapt en met drukknoppen aan de zijbeschermingsbalk worden bevestigd (afbeelding 1).

De Stiegmeyer-valpreventiemat van stevig schuimrubber met PU-toplaag verandert de valbeweging in een afrolbeweging (afbeelding 2).

Uitvoering: Beuken natuur R 5311 VV



## Bedverlenging

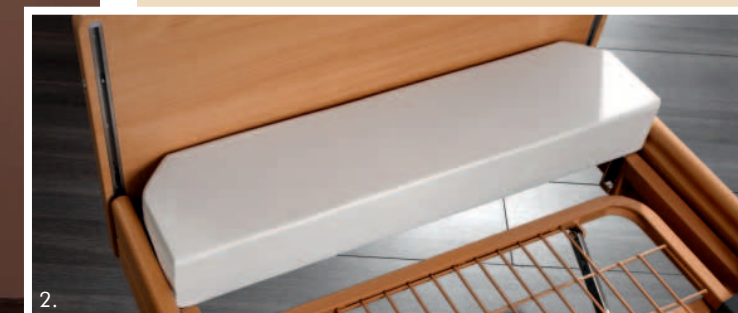


## Ruimte creëren: Onze bedverlengingen.

Bijzonder grote bewoners overschrijden de standaardafmetingen van een bed – om toch een comfortabele en gezondheidsbevorderende slaap te kunnen garanderen, kunnen onze bedden worden verlengd. De montage kan ook ter plaatse worden uitgevoerd door uw eigen technicus.

### **BEDVERLENGING voor de hoog-laag bedden Classiko en Elvido-Rega.**

De bedverlenging (afbeelding 1) kan af fabriek worden ingebouwd, maar ook naderhand ter plaatse worden gemonteerd. De verlenging bestaat uit een verlengelement van het ligvlak en een verlenging van de zijbeschermingselementen (afbeelding 3).

Voor de verlenging van het matras wordt een extra mat (afbeelding 2) (20 cm) gebruikt, dat op het verlengingselement wordt geplaatst. Geeft u bij de bestelling ook de hoogte van het matras aan.

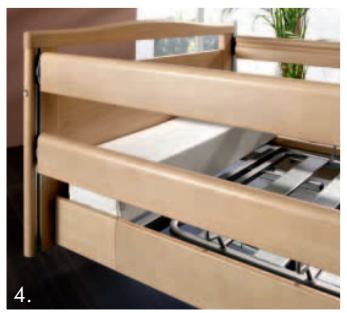

# Een overzicht van de bedverlengingen

## Bedverlenging ELVIDO

Alle Elvido-modellen zijn standaard uitgerust met een uittrekbaar verlengingselement. Om het te kunnen gebruiken, hoeven alleen de zijbeschermingsbalken en panelen maar te worden vervangen. Montagevoorbeeld zijverlengingssets (afbeelding 2). Omvang levering zijverlengingsset (afbeelding 3).

Bij de modellen Elvido, Elvido-Brevo en Elvido-Vano kan af fabriek een geïntegreerde bedverlenging\* met uitschuifbare zijbeschermingsbalken en panelen worden geleverd (grote afbeelding), waarbij voor de verlenging geen extra componenten noodzakelijk zijn. Met een druk op de knop kan het ligvlak worden verlengd. Bij alle andere modellen zijn extra montagesets leverbaar.

Voor het verlengen van het matras wordt een extra mat (20 cm) op het verlengingselement geplaatst (afbeelding 1). Geeft u bij de bestelling ook de hoogte van het matras aan.

## Bedverlenging AMARA en PARENO

De bedverlenging bestaat uit een verlengelement voor het ligvlak en verlengde zijbeschermingselementen. Montagevoorbeeld zijverlengingssets (afbeelding 4).

Omvang levering zijverlengingsset: ligvlakverlengelement in metalen uitvoering en verlengde zijbeschermingsbalken (afbeelding 5).

| Omvang levering voor hoog-laag bedmodel  | Afbeelding              | 4 x zijbe-<br>schermings-<br>balk | 2 x zijpaneel | 1 x bedverlen-<br>gingselement | 1 x extra mat |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Elvido met verlengb. bedverlenging       | P. 6                    |                                   |               |                                |               |
| Elvido-Brevo met verlengb. bedverlenging | P. 6                    |                                   |               |                                | x             |
| Elvido-Vano met verlengb. bedverlenging  | P. 6                    |                                   |               |                                | x             |
| Elvido                                   | P. 7, afbeelding 2 en 3 | x                                 | x             |                                | x             |
| Elvido-Brevo                             | P. 7, afbeelding 2 en 3 | x                                 | x             |                                | x             |
| Elvido-Vano                              | P. 7, afbeelding 2 en 3 | x                                 | x             |                                | x             |
| Elvido-Rega                              | P. 4-5                  | x                                 |               | x                              | x             |
| Classiko                                 | P. 4-5                  | x                                 |               | x                              | x             |
| Amara                                    | P. 7, afbeelding 4 en 5 | x                                 | x             | x                              | x             |
| Pareno                                   | P. 7, afbeelding 4 en 5 | x                                 | x             | x                              | x             |
| Belindo                                  | zonder afbeelding       | x                                 | x             | x                              | x             |
| Arena                                    | zonder afbeelding       | x                                 | x             | x                              | x             |



Rondom bescherming  
voor de bewoner

## Beschermt mens en materiaal: beschermende bekleding.

Onze beschermende bekleding vervult meerdere taken. de bekleding beschermt in het bijzonder de bewoners tegen letsel – aan de zijanten, maar ook aan het hoofd- en voeteneind.

Het bovenmateriaal bestaat uit kunstleer en is gevoerd met schuimrubber. De binnenzijde is voorzien van een PU-coating en genaaid, bijzonder gemakkelijk te onderhouden en duurzaam, tegelijkertijd heerlijk zacht en handzaam. De beschermende bekleding is rekbaar, slijtvast en bestendig tegen scheuren, maar ook tegen urine, bloed en in de handel verkrijgbare reinigings- en desinfectiemiddelen.

Uitvoering in verschillende afmetingen verkrijgbaar voor: **doorlopende zijbescherming** met twee balken 200 cm en 220 cm (afbeeldingen 1 en 6), twee balken plus opsteekbalk 200 cm (afbeelding 2), drie balken 200 cm en 220 cm (zonder afbeelding), **gecombineerde zijbescherming** met enkelvoudige bekleding voor gedeelde zijbescherming (grote afbeelding), **Mobivit** als opstapbescherming en overbrugging tussen de afzonderlijke bekledingen (afbeelding 3), **hoofdeinde**, eenvoudig met klittenband te bevestigen aan hoofd- en voeteneind (afbeelding 5).

Snel te verwijderen **zijbeschermingskussens** met afneembare PU-hoes en bijzonder zacht schuimrubber op maat (afbeelding 4). Kan gewoon worden geplaatst op de gecombineerde, gedeelde zijbescherming of bij doorlopende zijbeschermingsbalken met twee kussens als totale bescherming. Afmetingen: 950 x 265 x 100 mm.



1.



2.



3.



4.







5.



6.

Papegaai met ronde buis,  
steungreep en kabelhouders  
voor bijv. oproepsystemen

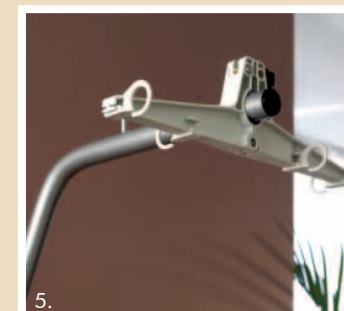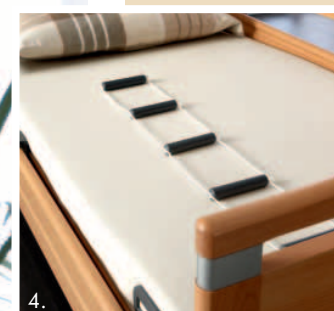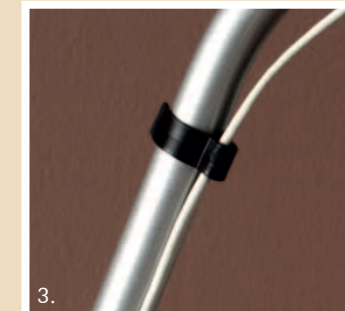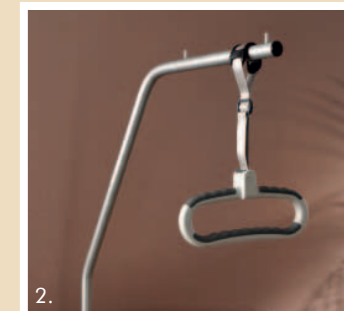

## Bewegingsvrijheid geven: papegaaien.

Het is voor de mens een basisbehoefte dat hij zich zo vrij mogelijk kan bewegen. Bij veel soorten letsel of therapieën hebben bewoners echter technische hulpmiddelen nodig om gemakkelijker overeind te komen. We hebben verschillende systemen ontwikkeld die hen daarbij helpen.



De **papegaai met ronde buis** (afbeelding 1) kan naar keuze links of rechts in de papegaaihuls op het hoofdeinde van het bed worden geplaatst. Hierbij zorgt de dubbelwandige buis voor bijzonder veel stabiliteit. Twee pennen op de horizontale stang voorkomen dat de steungreep wegglijdt.

De **steungreep** van stevig kunststof met bijzonder uitgebalanceerde greepeigenschappen kan met een zelfoprollende riem traploos in hoogte worden versteld (afbeelding 2). De twee greepvlakken hebben een aangenaam softtouch-oppervlak.

**Kabelhouders** (afbeelding 3), die op de papegaai kunnen worden geklemd, helpen bij het netjes aanleggen van voedingskabels of oproepsystemen. De kabelhouders dienen bovendien als trekontlasting om te voorkomen dat de handbediening of kabelverbinding losraken.

Met een **bedladder** kan men ook zonder papegaai overeind komen. De bedladder wordt aan het voeteneinde gemonteerd en gewoon op het bed gelegd (afbeelding 4).

Voor het ophangen van infuuszakken kan in een oogwenk een **infuushouder** van kunststof aan de horizontale stang van de papegaai worden bevestigd. Om te voorkomen dat deze verdraait, kan de infuushouder bij de voorste of achterste pen op de horizontale stang worden bevestigd (afbeelding 5).

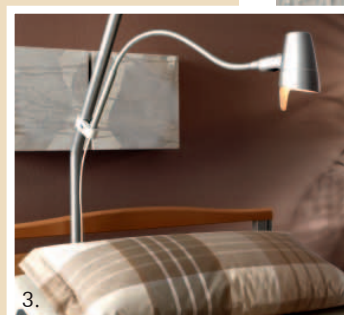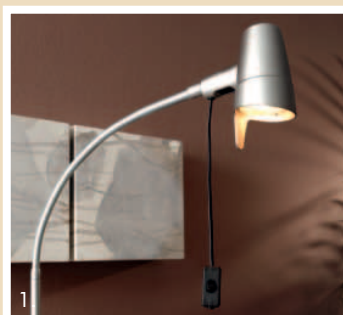

## En het werd licht: het lampenassortiment.

Uw bewoners moeten zich zo goed en zelfstandig mogelijk voelen – daarbij hoort ook dat zij hun eigen licht hebben, zonder dat zij hierbij hun medebewoners storen.

### **SOLA**

Veelzijdig te gebruiken halogeen-leeslamp. Gemakkelijk te verstellen, van onbreekbaar kunststof, stevige, flexibele arm. Ventilatieopeningen en cilinders voor de warmteafleiding zorgen voor een geringe warmteontwikkeling bij de lampen (afbeeldingen 1-3 en 6).

Lamp Sola met lange arm inclusief verlichte snoerschakelaar (afbeelding 1).

Lamp Sola met lange arm en tuimelschakelaar op de lampenkap (afbeelding 2).

Lamp Sola met korte arm (afbeelding 3). De lamp kan met een klem direct worden gemonteerd op de papegaai.


Papegaaihuls met fixeerring om de draaibeweging van de lamp Sola te begrenzen (afbeelding 4).

### **LUMO LED-lamp**


Leeslamp met uitstekende lichtkwaliteit, volledig zonder warmteontwikkeling en met gering energieverbruik, onderhoudsvrij. Lumo ontwikkelt een helder, zeer nauwkeurig licht tot 1100 lx (grote afbeelding).

### **LAMPEN aan het nachtkastje**

Lamp Lumo met korte arm (afbeelding 5) en lamp Sola met korte arm (afbeelding 6) ter bevestiging aan het nachtkastje, bijvoorbeeld aan de multifunctionele rail.


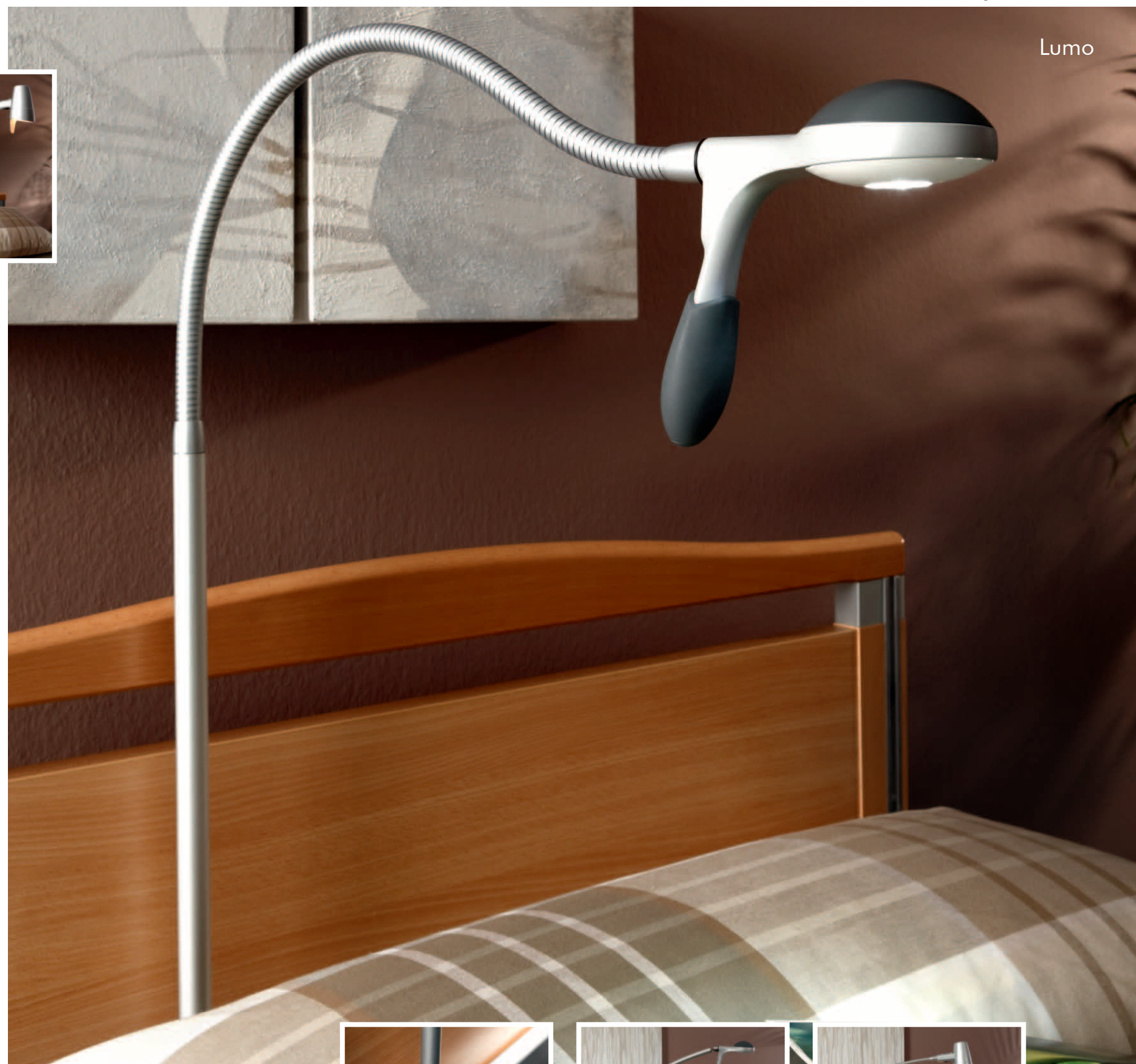


Lumo

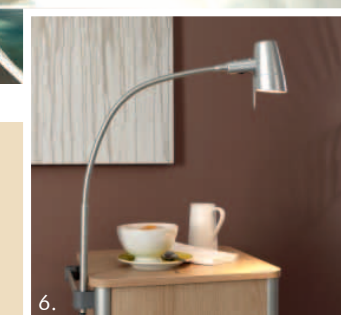



Wandafstandhouder

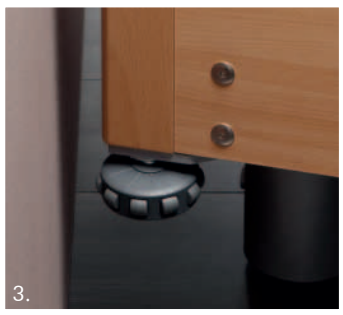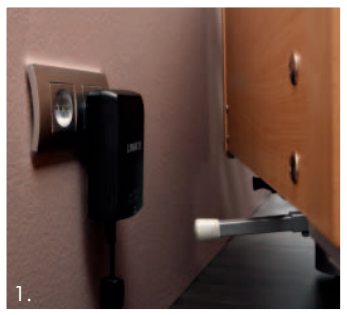

# Praktische extra's: extra uitrusting Mobiliteit.

Wandafstandhouders voorkomen beschadigingen aan wanden en stopcontacten. Voor de montage is geen gereedschap nodig, de afstandhouders kunnen gewoon op een dwars- of lengtebalk van het onderstel worden geplaatst (grote afbeelding).

A propos mobiliteit: **wandbeschermingsrollen** beschermen de wand bij het dagelijkse manoeuvreren van het bed – niet alleen bij horizontaal contact (afbeelding 2), maar ook als het bed in hoogte wordt versteld, door geïntegreerde kunststof rollen (afbeelding 3).

De complete elektriciteit van het hoog-laag bed Elvido kan optioneel op **24-volt\*** werken met een veilig weggewerkte adapter. De 24 volt adapter beschikt over een veiligheidsstekker die in ieder vrij verkrijgbaar stopcontact past (afbeelding 1). Zo is de veiligheid gewaarborgd omdat bij de bedden geen 230-volt-netspanning aanwezig is. Tegelijkertijd wordt een snellere verstelbaarheid bij geringer stroomverbruik bereikt. Dankzij de accu kan het bed ook zonder netstroom worden versteld – volledige mobiliteit is dus gegarandeerd.


De accu is verkrijgbaar in een set met een oplader en een houder (afbeelding 4).

Accuhouder voor het hoog-laag bed (afbeelding 5).

| Wandafstandhouder voor model | Bevestiging aan het hoofdeinde | Bevestiging opzij |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Elvido                       | Type 01                        | Type 01           |
| Elvido-Brevo                 | Type 01                        | Type 01           |
| Elvido-Vano                  | Type 03                        | Type 01           |
| Elvido-Rega                  | Type 02                        | Type 01           |
| Classiko                     | Type 02                        | Type 01           |
| Amara                        | Type 04                        | Type 01           |
| Amara-Tero                   | Type 04                        | Type 01           |

\*verkrijgbaar tegen meerprijs

## Infuushouders

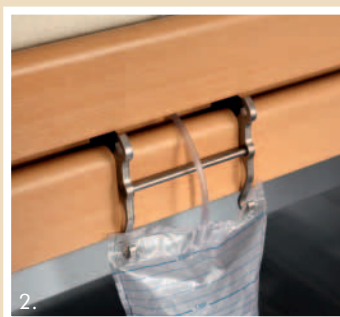

## Praktische extra's: extra uitrusting Medisch.

Rondom het bed en de bewoner zijn medische hulpmiddelen nodig. Bij Stiegmeyer kunnen de belangrijkste hulpmiddelen praktisch en stevig aan het bed worden gemonteerd. In functionaliteit en design aangepast, perfect qua ergonomie en hantering.

**Universele houders** voor gebruikelijke drainagezakjes kunnen bij het model Elvido met rails\* in de hiervoor voorziene opname worden gehangen (afbeelding 1).


Voor het doorvoeren van de drainageleidingen tussen de zijbeschermingsbalken kan de **urinezakhouder** worden gebruikt. Deze beschermt de leidingen en kan op de onderste beschermingsbalk aan de zijkant worden geplaatst (afbeelding 2).

Bij gebruik van urineflesjes wordt de **urinefleshouder** (afbeelding 3) op de zijbalk geplaatst.

De **infuusstandaard recht** wordt met behulp van de kunststof adapterhuls in de papegaaihuls geplaatst. Deze standaard is in hoogte verstelbaar en belastbaar tot 2,0 kg (afbeelding 4).

De **infuusstandaard met bocht** heeft een 45°-bocht en voorkomt bij een verandering van het ligvlak in de Trendelenburg-positie beschadiging van de wand (grote afbeelding).



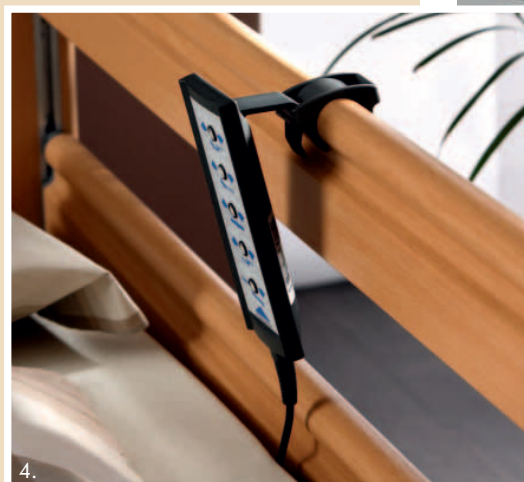

Beddentransporters

## Praktische extra's: extra uitrusting Transport en bediening.

Wij vinden dat iedereen het bij de verzorging zo gemakkelijk mogelijk moet hebben: dat geldt uiteraard voor bewoners, maar ook voor het verplegend personeel. Wij maken het beide zo gemakkelijk mogelijk met onze innovatieve oplossingen.

**Stiegmeyer-beddentransporter.** Geschikt voor het transport en de opslag van hoog-laag bedden met een vaste houten ombouw. De beddentransporter kan ook worden gebruikt voor onderhoud en reparatiewerkzaamheden. De grote loopwielen van de beddentransporter kunnen afzonderlijk worden gedraaid en geremd (grote afbeelding).

Bij gebruik van dikke matrassen kan de zijbescherming met ca. 145 mm worden verhoogd met een **bedhekverhoging** (afbeelding 1). Door de excentrische verbinding kan deze verhoging worden gebruikt voor verschillende zijhekkuitvoeringen.

Voor het naderhand monteren van zijbeschermingen aan hoog-laag bedden zonder railgeleiding voor zijbeschermingsbalken kan de **zijbescherming 6638** worden gebruikt. Voorwaarde voor de bevestiging is een draadbus in het hoofd- en voeteneind (afbeelding 2).

De **zwenk- en draaibare houder voor de handset** (afbeelding 3) met flexibel statief maakt deel uit van de comfortuitrusting van het hoog-laag bed. De houder voor de handset wordt gewoon in de hiervoor bedoelde opname geplaatst (niet voor alle bedmodellen).

De **houderclip voor de bedieningsunit** (afbeelding 4) wordt op de bovenste zijbalk geplaatst. Zo kan de handset in elke gewenste positie worden weggelegd (voor balken met greep).

# Praktische extra's: Comfort en gezelligheid.

Het **dienblad** wordt eenvoudig maar stabiel op de opgeklapte zijbescherming geplaatst. Voor zijdelingse stabilisatie bevinden zich onder het dienblad aanslagbuffers. Als het dienblad niet wordt gebruikt, kan het aan het paneel op het hoofdeinde worden gehangen (grote afbeelding). Ook leverbaar voor stoelen met armleuning.

De **dossierhouder** kan aan het bed of nachtkastje worden gehangen om documentatie over de bewoner of tijdschriften in te bewaren (afbeelding 1).

Bij de zelfklevende **naamplaathouder** van aluminium kan het naamplaatje verwijderd, beschreven en weer geplaatst worden (afbeelding 2).


De **apparaatbeugel** voor het ophangen van compressors voor antidecubitussystemen, wordt aan het paneel op het hoofdeinde gehangen. Deze beugel kan ook worden gebruikt voor het bewaren van dekens en handdoeken (afbeelding 3).

Het **schrijfplateau** is universeel inzetbaar, praktisch, opklapbaar en kan gemakkelijk in iedere gewenste positie worden gezet. Het beschikt aan de bovenzijde over een documenthouder en een aluminium rand onder en opzij als aanslag (afbeelding 4).


De **krukhouder** kan worden bevestigd waar hij nodig is. Via een excentrische vergrendeling kan deze eenvoudig worden geplaatst en verwijderd (afbeelding 5).



1.

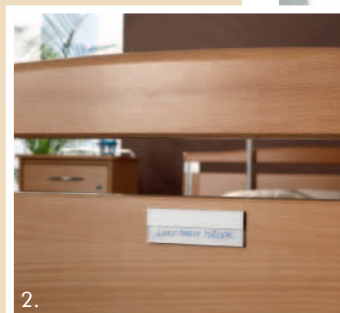

2.

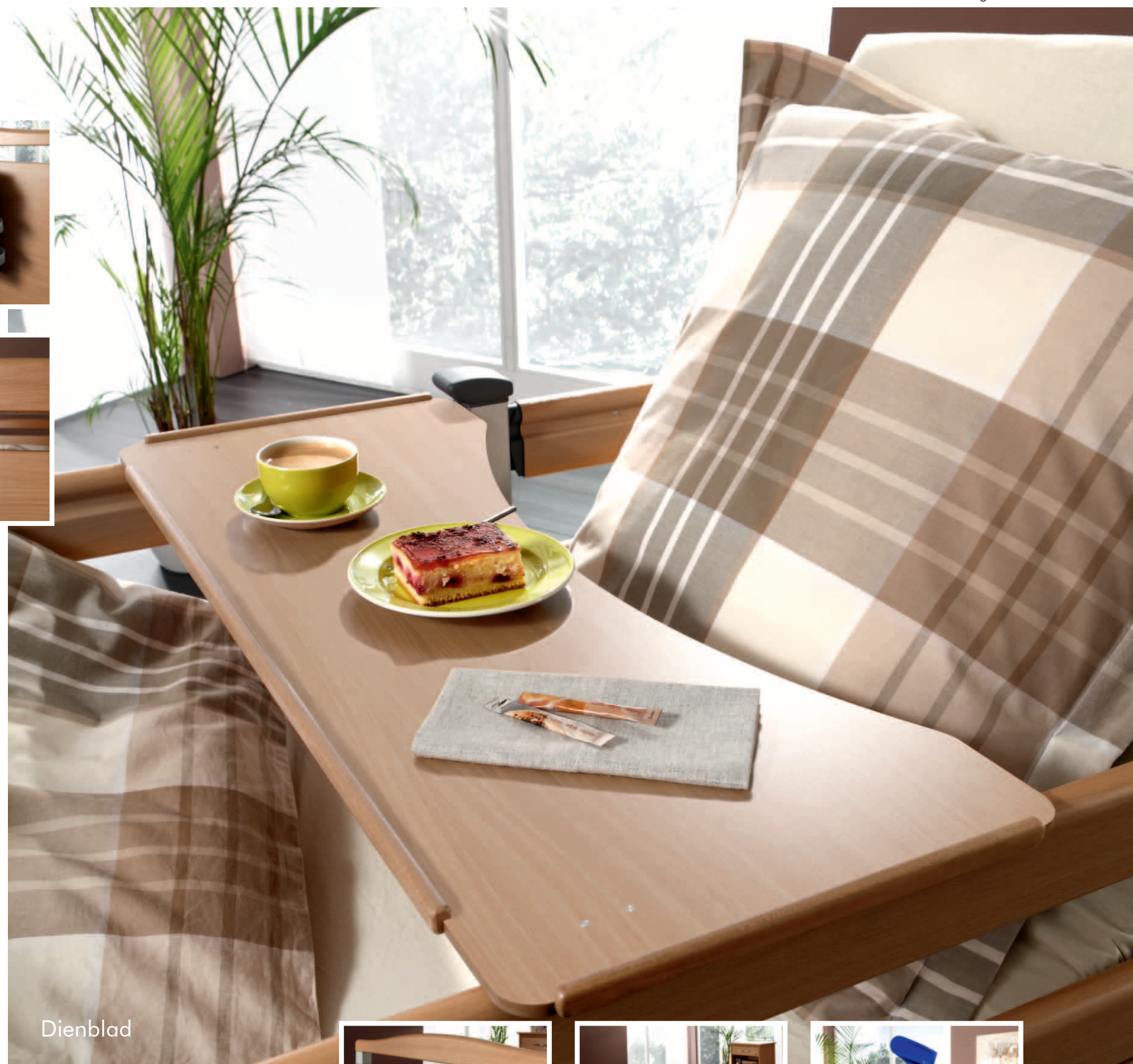

Dienblad



3.



4.



5.

Rail op het nachtkastje



## Speciale uitrusting voor het nachtkastje.

Naast het bed is het nachtkastje zonder twijfel het belangrijkste meubelstuk in de kamer. We hebben er veel aan gedaan om de functionaliteit ervan nog verder te verbeteren.

De aluminium **rails** op de bovenplaat van het nachtkastje dient voor de bevestiging van de praktische **handdoekhouders** of flessenhouders. Deze kunnen over de gehele lengte van de rail worden verschoven (grote afbeelding).

De **flessenhouder** dient voor het veilig bewaren van flessen en glazen op de bovenplaat van het nachtkastje (afbeelding 2).

De **krukhouder aan het nachtkastje** is altijd binnen handbereik. Via een excentrische vergrendeling zuigt de krukhouder zich vast op het gladde oppervlak (afbeelding 1). Wordt geleverd inclusief zelfklevende bevestigingsschijf.

Het kindveilige, **meervoudige stopcontact** met netvoedingskabel is VDE gekeurd en kan worden gebruikt voor apparatuur van 230 volt (afbeelding 3).

Een **afvallemmer met deksel** en een inhoud van ca. 5 l is geschikt voor het veilig en hygiënisch verzamelen van afval. Het reservoir is van kunststof, kan eenvoudig worden gereinigd en wordt gewoon aan de multifunctionele rail van het nachtkastje gehangen (afbeelding 4).

De **dossierhouder** kan door de bewoner worden gebruikt voor het bewaren van tijdschriften en boeken, waardoor er meer plaats vrij blijft op het nachtkastje (afbeelding 5).



