



INOVIA FAMILIE

INNOVATIEF VERPLEEGBED



Voordelen

- Verfijnde, hoogwaardige afwerking
- Hyperlaag bed, instaphoogte van 22cm
- Technische details
 - Rugverstelling met virtueel draaipunt tegen het onderuit glijden
 - Semi-centraal remsysteem
 - Verborgene wielen
- 24 Volt laagspanning (veilig, lager energieverbruik)
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid of tweedelige Mobiflex onrusthekken voor meer flexibiliteit
 - Hoogte 43cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 21cm)
- Hoge veilige werklust, geschikt voor zwaardere patiënten
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
 - Elektrische hoog-laag verstelling van 22 tot 80cm
 - Elektrisch verstelbaar rugdeel
 - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Kolombed (motoren voor hoogtevariatie aan hoofd- en voeteinde)
- Zetelpositie
 - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren

Eigenschappen


- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 22-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar



- Virtueel draaipunt
 - Bij het inclineren van de rugsteun verschuift deze automatisch naar achter
 - Het zorgt voor een optimale houding wanneer de gebruiker wil gaan zitten en bij het terugkeren naar lighouding
 - Het vermindert de schuifkrachten (kans op decubitus)
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt
- Veilige werklust 225kg – max. patiëntengewicht 190kg
- Semi-centrale rem
- Ombouw en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen

Model varianten

- Inovia 100
 - Ligvlak 100x200cm
- Inovia met gedeelde Mobiflex onrusthekken
 - De gedeelde onrusthekken kunnen aan 1 zijde, links of rechts van het bed voorzien worden (terwijl aan de andere kant doorlopende onrusthekken zijn)
 - De gedeelde onrusthekken kunnen ook aan beide zijden van het bed geplaatst worden
 - Verstelbaar in 2 niveaus

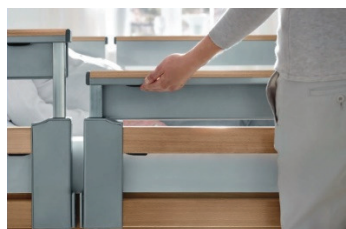

Opties en accessoires

- Houtdecor in havanna (onder voorbehoud van beschikbaarheid, langere levertermijn)
- Bedverlenging
 - 20cm (voor doorlopende onrusthekken)
 - 27cm (voor Mobiflex onrusthekken)



Bestelnummers

BBIN-DO	Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 90x200cm
BBIN-2MF	Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken aan 1 zijde en Mobiflex onrusthekken aan de andere zijde (linker- of rechterzijde, gekeken vanaf het voeteinde) – ligvlak 90x200cm
BBIN-4MF	Inovia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 90x200cm
BBIN100-DO	Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 100x200cm
BBIN100-2MF	Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken aan 1 zijde en Mobiflex onrusthekken aan de andere zijde (linker- of rechterzijde, gekeken vanaf het voeteinde) – ligvlak 100x200cm
BBIN100-4MF	Inovia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 100x200cm