

Europese Regelgeving Reiniging/Desinfectie Medische apparaten



En nu ?



Agenda

1. Wie is Distrac Group?
2. Wie is RehaWash?
3. Reiniging/desinfectie/drogen momenteel?
4. Kenmerken RehaWash.
5. Voordelen RehaWash.
6. RehaWash Family.
7. FAQ.

1. Wie is Distrac Group ?

- ✓ 1993 Oprichting.
Gestart als groothandel in de Technische Orthopedie.
- ✓ 1995 Exclusiviteit Tempur in België en Luxemburg.
Start wetenschappelijke studies.
- ✓ 1997 Take-off Tempur.
- ✓ 1999 Agent voor Stiegmeyer in Vlaanderen.
- ✓ 2000 Ingebruikname nieuwbouw te Hoegaarden.
- ✓ 2003 Exclusiviteit Stiegmeyer meubilair in België.
Stiegmeyer wordt minderheidsaandeelhouder van Distrac.
- ✓ 2005 Exclusiviteit Tempur in Nederland (intramuraal).
- ✓ 2007 Exclusiviteit Burmeier in België.
- ✓ 2008 Toetreden externe investeringsmaatschappij.
- ✓ 2013 Meerderheidsparticipatie firma Salens, ontstaan Distrac Group.
- ✓ 2017 Exclusiviteit Tempur in Nederland (winkels).
- ✓ 2017 Exclusiviteit Rehawash in de Benelux.



2. Wie is RehaWash ?

- ✓ RehaWash Systems GmbH ontwikkelt en produceert reeds meer dan 15 jaar reinigings- en desinfectiesystemen voor rehabilitatieapparatuur zoals rolstoelen, matrassen, bedden, enz.
- ✓ RehaWash is gevestigd in Weisswasser (nabij Berlijn), Duitsland.
- ✓ RehaWash streeft ernaar om de hoogste internationale veiligheidsnormen te overtreffen.
- ✓ Alle systemen en de productie zijn gecertificeerd en gevalideerd o.a. TÜV.
- ✓ 100% Duits bedrijf – Nederlandse eigenaren.
- ✓ RehaWash heeft een kwaliteitswaarborgsysteem volgens DIN EN ISO 13485.
- ✓ Niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa vindt u de RehaWash systemen in woonzorgcentra, ziekenhuizen, enz.
- ✓ Verkoop in meer dan 15 landen binnen Europa.



3. Reiniging, desinfectie en drogen

- ✓ Hoe geschiedt reiniging/desinfectie/drogen momenteel?
- ✓ Geven we voldoende aandacht aan hygiënevraagstukken?
- ✓ Is alles werkelijk schoon en droog?
- ✓ Reinigen wij frequent en efficiënt genoeg?
- ✓ Weet u hoe en hoe vaak uw rolstoel of ziekenhuisbed en -matras worden gereinigd?
- ✓ Hygiënerichtlijnen worden aangescherpt.
- ✓ Infectiecontrole.

4. Kenmerken RehaWash

- ✓ Thermochemisch proces.
- ✓ Middels sproeiers wordt warm water gedoseerd gebruikt in de RehaWash cabines.
- ✓ Biologisch afbreekbare reinigings- en desinfectiemiddelen (Dr. Weigert).
- ✓ Rehawash systemen hebben een aantal voorgeprogrammeerde programma's; maatwerk is mogelijk.
- ✓ Het loont al vanaf het reinigen van 8 tot 10 items per dag.

5. Voordelen RehaWash



Tijdsbesparing

Fase 1 – Reiniging

Gedurende 3 minuten worden de medische hulpmiddelen in de cabine besproeid met heet water gemengd met een reinigingsmiddel. Het water bevindt zich in een tank (35 à 40L) van waaruit het water verstuift wordt via de filters en sproeiers.

Fase 2 - Uitpompen

Na de reinigingsfase wordt het water afgevoerd. Dit duurt ongeveer 1 minuut.

Fase 3 - Vullen


De cabine wordt daarna opnieuw gevuld met 35 à 40L proper water. Dit duurt ongeveer 3 minuten. (Indien de machine is uitgerust met een boiler, wordt het water verwarmd.)

Fase 4 - Spoelen

De medische hulpmiddelen worden gedurende 1 minuut besproeid met warm water, gemengd met een spoelmiddel. Spoelen maakt het mogelijk om zeep- en vlek-vrij te drogen. Na de spoelfase blijft het water in de tank en wordt het gebruikt voor de volgende reinigingscyclus. De totale looptijd van de het 3 minuten durende reinigingsprogramma bedraagt **8 minuten.**



5. Voordelen RehaWash

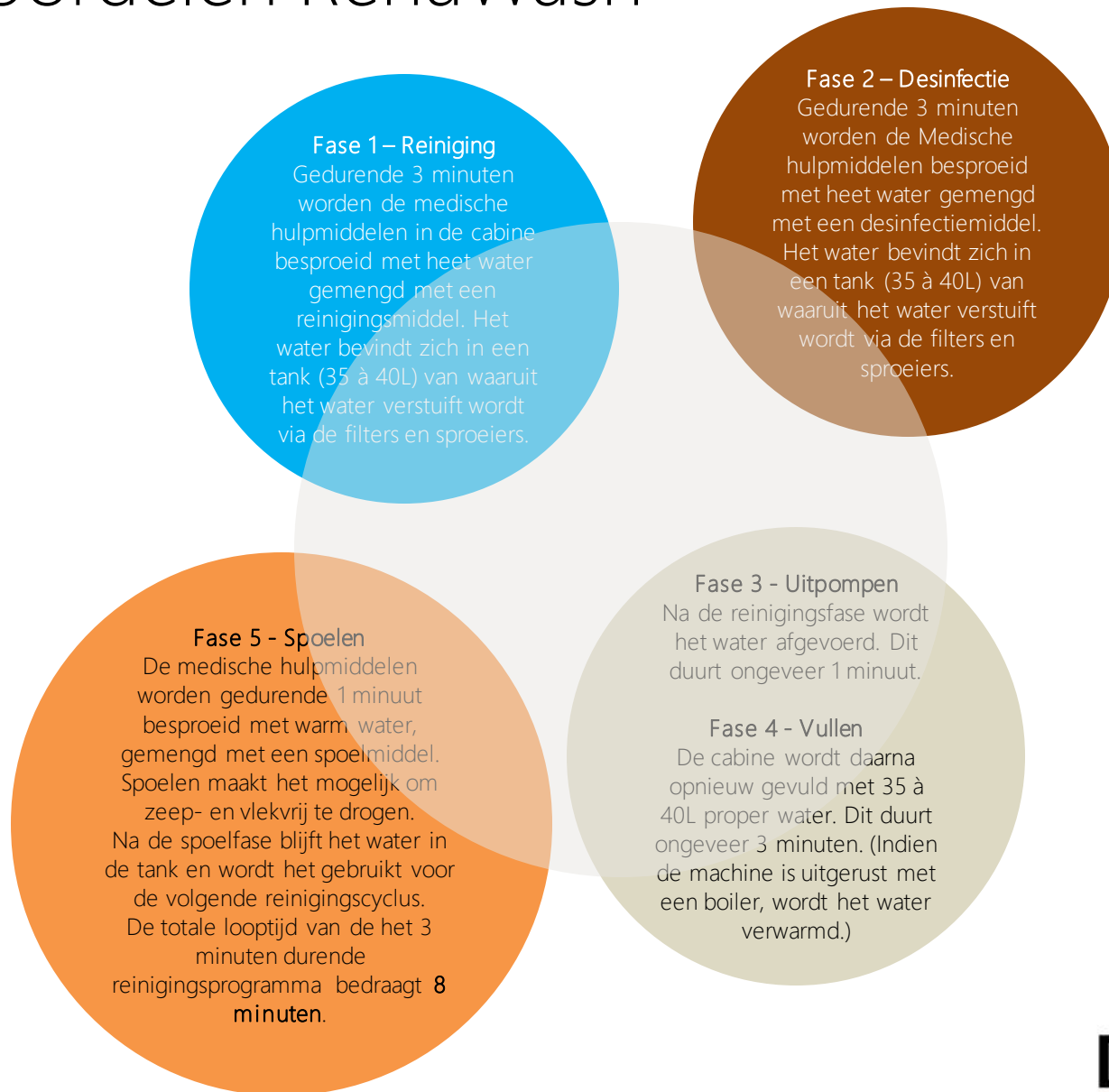

5. Voordelen RehaWash



Gemakkelijk en mobiel.



Gecertificeerde desinfectie.

5. Voordelen RehaWash



Veilig.



Milieubewust.



Economisch voordelig.

5. Voordelen RehaWash



Kwaliteit.



Op maat gemaakt.

6. RehaWash Family

✓ 313

Rolstoel en kleine medische apparaten.



6. RehaWash Family

✓ 309

Hogere cabine.

Bedden in transportpositie en medische apparaten.




6. RehaWash Family

✓ 904

Grootste cabine.

Bedden in normale positie, AD matrassen, rolstoelen en medische apparaten.

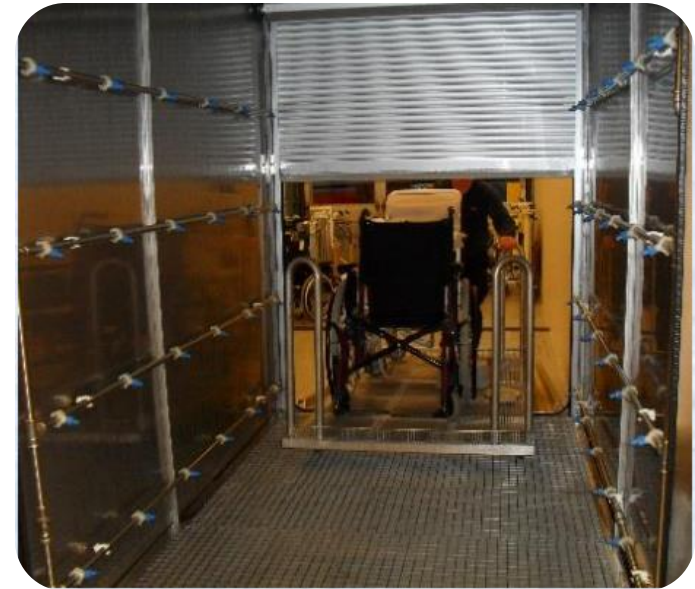


6. RehaWash Family


✓ Droger.



6. RehaWash Family

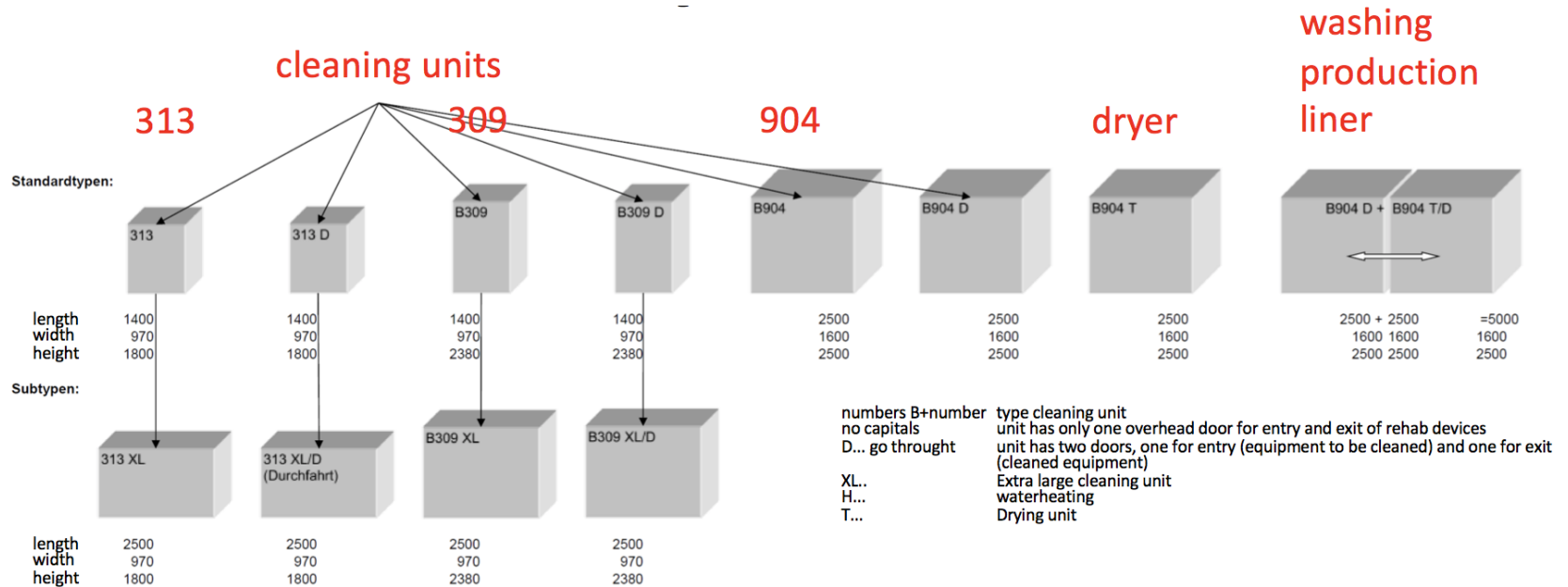

Rehawash has drying units for the 313, 309, 904 and all their modifications

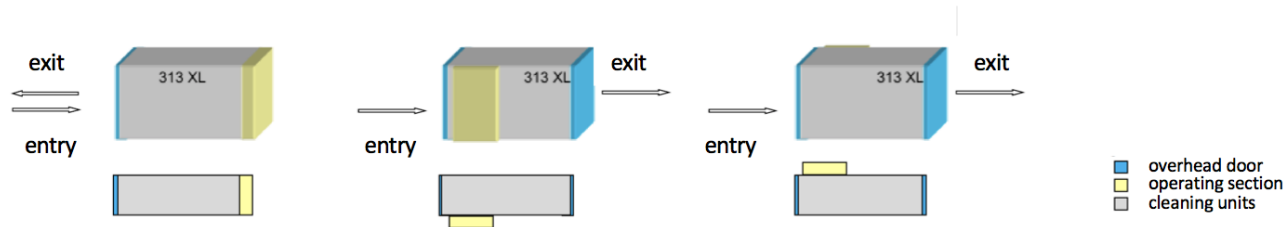

6. RehaWash Family

Product:	Washing machine Wheelchair series 313	Washing machine series B 309	Bed washing machine series B 904
			
Productie locatie:			
features			
suitable for	wheelchairs, commode chairs, rollators, AD matr.	hospital beds, AD matr., wheelchairs, rollators etc.	hospital beds, AD matr., wheelchairs, rollators etc.
capacity	1 wheelchair	1 hospital beds in transport position, 1 wheelchairs	1 hospital beds, 3 wheelchairs
cleaning programs	6, Duration 8 /10/12 min. Adjustable	6, Duration 8/10/12 min. Adjustable	6, Duration 8/10/12 min. Adjustable
disinfection programs	2	2	2
Custom wash programs possible	yes	yes	yes
document printing	yes	yes	yes
with drying	yes	yes	yes
available with Condense	yes	yes	yes
washing temperature	40-45 °C	40-45 °C	40-45 °C
mobile	yes	yes	yes
water consumption	35-40 liter	35-40 liter	35-40 liter
tape water	min. 2 bar	min. 2 bar	min. 2 bar
energy consumption	0,2 kW per wash cycle	0,2 kW per wash cycle	0,2 kW per wash cycle
energy supply	230 volt/400 volt; 16A / 32 A,	230 volt/400 volt; 16A / 32 A,	230 volt/400 volt; 16A / 32 A,
operation			
Toutchtasten	yes	yes	yes
Display of information	yes	yes	yes
Technical ads selectable	yes	yes	yes
Counter for wash cycles	yes	yes	yes
Interface for information	yes	yes	yes
roller door	by hand / automatic	by hand / automatic	by hand / automatic
Easy cleaning of the filter	yes	yes	yes
filter material	stainless steal	stainless steal	stainless steal

7. Frequently asked questions (FAQ)

- ✓ Is enige schoonmaak nodig, voordat een RehaWash systeem wordt gebruikt?
- ✓ Is het mogelijk om de bekleding van rolstoelen en co te wassen?
- ✓ Hoe worden AD matrassen geplaatst ter reiniging, desinfectie en drogen?
- ✓ Hoeveel schoonmaakmiddel is nodig?
- ✓ Heeft de reiniging invloed op metalen onderdelen?
- ✓ Moeten motoren van bedden worden verwijderd?
- ✓ Zijn plekken zichtbaar na het schoonmaken?

