



REGIA FAMILIE

VEELZIJDIG VERPLEEGBED VOOR HOGE EISEN



Voordelen

- Verfijnde, hoogwaardige afwerking
- Hyperlaag bed, instaphoogte van 26cm
- Ruime keuze van design panelen, afwerking in stof of kunstleder voor een nog huiselijker gevoel
- Technische details
 - Rugverstelling met virtueel draaipunt tegen het onderuit glijden
 - Centraal remsysteem
 - Verborgene wielen
- 24 Volt laagspanning (veilig, lager energieverbruik)
- Zonder veiligheidshekkens, met eendelige veiligheidshekkens voor optimale veiligheid of met tweedelige Mobiflex veiligheidshekkens voor meer flexibiliteit
 - Hoogte 43cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 21cm)
- Hoge veilige werklust, geschikt voor zwaardere patiënten
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
 - Elektrische hoog-laag verstelling van 26 tot 80cm
 - Elektrisch verstelbaar rugdeel
 - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstroom
- Hybride bed
- Zetelpositie
 - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren
- Keuze uit een waaier aan extra opties en uitrustingen



Eigenschappen

- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 26-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Virtueel draaipunt
 - Bij het inclineren van de rugsteun verschuift deze automatisch naar achter
 - Het zorgt voor een optimale houding wanneer de gebruiker wil gaan zitten en bij het terugkeren naar lighouding
 - Het vermindert de schuifkrachten (kans op decubitus)
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt
- Veilige werklust 225kg – max. patiëntengewicht 190kg
- Verborgene wielen met centrale rem
- Ombouw en houten veiligheidshekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen

Design panelen

- Primus panelen (hoofdpaneel gesloten met massief houten bovenlijst, voetpaneel met massieve greeplijst)
- Primus low panelen (hoofdpaneel gesloten met massief houten bovenlijst, verlaagd voetpaneel met massieve greeplijst) (uitsluitend in combinatie met Mobiflex veiligheidshekken)
- Nobla panelen (houten of vast gestoffeerde rechthoekige hoofd- en voetpanelen) (uitsluitend in combinatie met Mobiflex veiligheidshekken)
- Nobla mala (houten of vast gestoffeerd rechthoekig hoofdpaneel, houten of vast gestoffeerd verlaagd voetpaneel) (uitsluitend in combinatie met Mobiflex veiligheidshekken)
- Prinzino panelen (hoofd- en voetpanelen met massieve rand en greeplijst bovenaan)



Primus



Primus low



Nobla



Nobla mala



Prinzino





Model varianten

- Regia 100
 - Ligvlak 100x200cm
- Regia zonder veiligheidshekken
- Regia met eendelige veiligheidshekken
- Regia met 2 gedeelde Mobiflex veiligheidshekken
- Regia met 4 gedeelde Mobiflex veiligheidshekken



Veiligheidshekken

- Regia zonder veiligheidshekken
 - Geniet van alle voordelen van een elektrisch bed, zonder de look van een verzorgingsbed
 - Afwerking in houtdecor of bekleed



- Regia met eendelige veiligheidshekken
 - Maximale veiligheid dankzij de eendelige veiligheidshekken



- Regia met 2 gedeelde Mobiflex veiligheidshekken
 - Deze uitvoering biedt veel comfort, veiligheid én mobiliteit aan de gebruiker
 - De veiligheidshekken worden enkel aan het hoofdeinde voorzien en voldoen met een lengte van 110cm volledig aan de normeringen
 - Afwerking in houtdecor of bekleed



- Regia met 4 gedeelde Mobiflex veiligheidshekken
 - Deze uitvoering biedt veel comfort, veiligheid én mobiliteit aan de gebruiker
 - De veiligheidshekken worden zowel aan hoofd- als voeteinde voorzien: de elementen zijn 90cm en 110cm lang en kunnen naar keuze gecombineerd worden
 - Afwerking panelen in houtdecor of bekleed






Modulair design – Easy switch


Kies uw Regia met de gedeelde Mobiflex veiligheidshekken of zonder veiligheidshekken en profiteer van het flexibele Easy Switch-systeem. Het Easy Switch-principe is even eenvoudig als indrukwekkend: De Mobiflex veiligheidshekken, de hoofd- en voetpanelen en de zijpanelen kunnen zonder gereedschap worden bevestigd en verwijderd. Dit is mogelijk dankzij eenvoudig te gebruiken bevestigingshaken die stevig vastklikken en niet per ongeluk door de gebruiker kunnen worden geopend.

Dankzij het Easy Switch-systeem kan u de Regia op elk moment eenvoudig voorzien van veiligheidshekken of een nieuwe look aanmeten, aangepast aan uw wensen. Het wordt een bed dat zich samen met u ontwikkelt en u in elke fase van uw leven ondersteunt. De afneembare zijpanelen en veiligheidshekken zijn snel om te zetten naar welke zorgsituatie dan ook. Ze maken het ook aanzienlijk gemakkelijker om het bed te monteren.

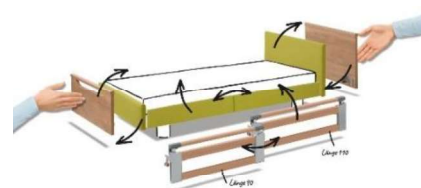

Opties en accessoires

- Houtdecor in esdoorn, kers, havanna of lindberg eik (onder voorbehoud van beschikbaarheid, langere levertermijn)
- Beklede hoofd- en voetpanelen en zijkanten
 - stof: rood, groen
 - kunstleder: wit, antraciet

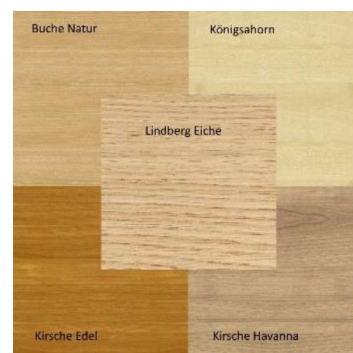

Stof: rood

Stof: groen

Kunstleder: wit

Kunstleder: antraciet

- Onderbedverlichting
- Comfort ligvlak
- Dekenrek
- Trendelenburg positie op aparte handbediening
- Wandafstandhouder
- Movo onderstel met grote wielen (100mm)



- Bedverlenging
 - Voor de bedden met doorlopende veiligheidshekken bestaat er een complete verlengset (ligvlakverlengstuk, 4 langere veiligheidshekken en verlengstukjes voor de zijpanelen) – lengte 20cm
 - Voor de bedden met mobiflex of zonder veiligheidshekken kan er bij bestelling van het bed gekozen worden voor een verlengde uitvoering. De veiligheidshekken en zijpanelen worden dan in lengte 110cm +110cm geleverd. Er dient bijgevolg enkel een ligvlakverlengstuk bijbesteld te worden (lengte 27cm). Achteraf kan ook een volledige verlengset worden bijbesteld. (ligvlakverlengstuk en langere veiligheidshekken of zijpanelen).

Bestelnummers

BBREG-P-DO	Regia – 24V – met eendelige veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Primus panelen
BBREG-PR-DO	Regia – 24V – met eendelige veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Prinzino panelen
BBREG-N-4MF	Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla panelen
BBREG-NM-4MF	Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen
BBREG-PL-4MF	Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Primus low panelen
BBREG-PR-4MF	Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Prinzino panelen
BBREG-NS-4MF	Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla panelen Beklede hoofd- en voetpanelen: kleur naar keuze
BBREG-NMS-4MF	Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen Beklede hoofd- en voetpanelen: kleur naar keuze
BBREG-N-2MF	Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 90x200cm – met Nobla panelen
BBREG-NM-2MF	Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen
BBREG-PL-2MF	Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 90x200cm – met Primus low panelen
BBREG-PR-2MF	Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 90x200cm – met Prinzino panelen
BBREG-NS-2MF	Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 90x200cm – met Nobla panelen Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze
BBREG-NMS-2MF	Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze
BBREG-N-HOTEL	Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla panelen
BBREG-NM-HOTEL	Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen
BBREG-PL-HOTEL	Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Primus low panelen
BBREG-PR-HOTEL	Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Prinzino panelen
BBREG-NS-HOTEL	Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla panelen Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze
BBREG-NMS-HOTEL	Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze



- BBREG100-N-4MF Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla panelen
- BBREG100-NM-4MF Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla mala panelen
- BBREG100-P-DO Regia – 24V – met eendelige veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Primus panelen
- BBREG100-PR-DO Regia – 24V – met eendelige veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Prinzino panelen
- BBREG100-PL-4MF Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Primus low panelen
- BBREG100-PR-4MF Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Prinzino panelen
- BBREG100-NS-4MF Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla panelen
Beklede hoofd- en voetpanelen: kleur naar keuze
- BBREG100-NMS-4MF Regia – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla mala panelen
Beklede hoofd- en voetpanelen: kleur naar keuze
- BBREG100-N-2MF Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 100x200cm – met Nobla panelen
- BBREG100-NM-2MF Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 100x200cm – met Nobla mala
- BBREG100-PL-2MF Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 100x200cm – met Primus low panelen
- BBREG100-PR-2MF Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 100x200cm – met Prinzino panelen
- BBREG100-NS-2MF Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 100x200cm – met Nobla panelen
Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze
- BBREG100-NMS-2MF Regia – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – ligvlak 100x200cm – met Nobla mala panelen
Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze
- BBREG100-N-HOTEL Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla panelen
- BBREG100-NM-HOTEL Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla mala panelen
- BBREG100-PL-HOTEL Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Primus low panelen
- BBREG100-PR-HOTEL Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Prinzino panelen
- BBREG100-NS-HOTEL Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla panelen
Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze
- BBREG100-NMS-HOTEL Regia – 24V – zonder veiligheidshekken – ligvlak 100x200cm – met Nobla mala panelen
Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze



REGIA PARTNER

COMFORT EN VEILIGHEID VOOR KOPPELS



Toenemende behoefte aan zorg op oudere leeftijd stelt echtparen voor veel uitdagingen. Een van deze uitdagingen betreft het gedeelde bed. Vaak verhuist een partner naar een zorgbed, terwijl de ander alleen in het tweepersoonsbed achterblijft. De vertrouwde en intimiteit van de relatie lijdt hieronder. Het Regia Partner tweepersoonsbed biedt de oplossing.

De Regia Partner combineert de verzorgende kracht en het comfort van het Regia eenpersoonsbed met de voordelen van een dubbel bed. Tegelijkertijd kunnen de twee helften gemakkelijk worden gescheiden en weer worden samengevoegd als dat nodig is voor de verpleging aan het bed, of als de partners even in aparte kamers willen slapen.

Voordelen

- Zorg en comfort speciaal ontwikkeld voor koppels
- Twee ligvlakdelen van 90x200cm
- Hyperlaag bed, instaphoogte van 26cm
- Afwerking in stof of kunstleder voor een nog huiselijker gevoel
- Technische details
 - Rugverstelling met virtueel draaipunt en beenverstelling gebeuren individueel per ligvlakdeel
 - Hoogteverstelling en anti-Trendelenburg positie gebeuren altijd synchroon om inklemming te voorkomen
- Zijpanelen en Mobiflex veiligheidshekken kunnen flexibel aangewend worden dankzij het Easy Switch systeem

Eigenschappen


- 2x vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 26-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar



- Virtueel draaipunt
 - Bij het inclineren van de rugsteun verschuift deze automatisch naar achter
 - Het zorgt voor een optimale houding wanneer de gebruiker wil gaan zitten en bij het terugkeren naar lighouding
 - Het vermindert de schuifkrachten (kans op decubitus)
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstroom
- 24 Volt
- Veilige werklust 225kg – max. patiëntengewicht 190kg
- Verborgene wielen met centrale rem
- Ombouw en houten veiligheidshekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen

Design panelen

- Nobla panelen (houten of vast gestoffeerde rechthoekige hoofd- en voetpanelen)
- Nobla mala (houten of vast gestoffeerd rechthoekig hoofdpaneel, houten of vast gestoffeerd verlaagd voetpaneel)

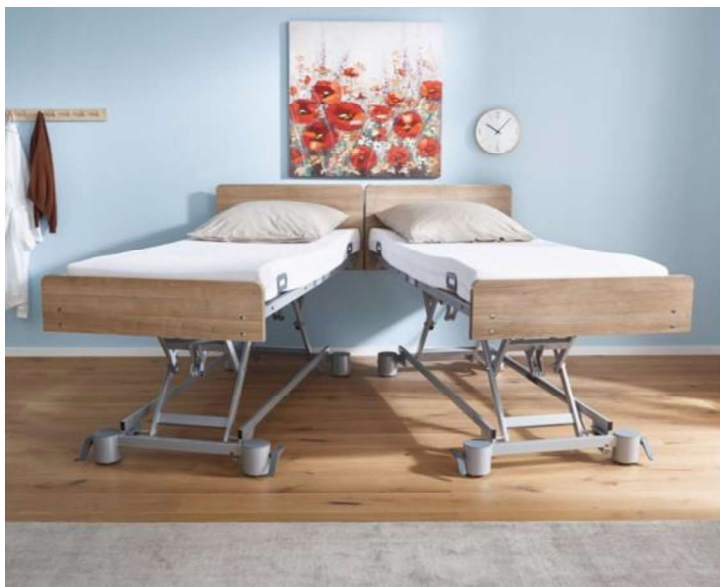

Nobla



Nobla mala

Veiligheidshekken

- Regia zonder veiligheidshekken
 - Geniet van alle voordelen van een elektrisch bed, zonder de look van een verzorgingsbed
 - Afwerking in houtdecor of bekleed
- Regia met 2 gedeelde Mobiflex veiligheidshekken
 - Deze uitvoering biedt veel comfort, veiligheid én mobiliteit aan de gebruiker
 - De veiligheidshekken worden enkel aan het hoofdeinde voorzien en voldoen met een lengte van 110cm volledig aan de normeringen
 - Afwerking in houtdecor of bekleed




- Regia met 4 gedeelde Mobiflex veiligheidshekken
 - Deze uitvoering biedt veel comfort, veiligheid én mobiliteit aan de gebruiker
 - De veiligheidshekken worden zowel aan hoofd- als voeteinde voorzien: de elementen zijn 90cm en 110cm lang en kunnen naar keuze gecombineerd worden
 - Afwerking panelen in houtdecor of bekleed

Modulair design – Easy switch

Het Easy Switch-principe is even eenvoudig als indrukwekkend: De Mobiflex veiligheidshekken, de hoofd- en voetpanelen en de zijpanelen kunnen zonder gereedschap worden bevestigd en verwijderd. Dit is mogelijk dankzij eenvoudig te gebruiken bevestigingshaken die stevig vastklikken en niet per ongeluk door de gebruiker kunnen worden geopend.

Dankzij het Easy Switch-systeem kan u de Regia op elk moment eenvoudig voorzien van veiligheidshekken of een nieuwe look aanmeten, aangepast aan uw wensen. Het wordt een bed dat zich samen met u ontwikkelt en u in elke fase van uw leven ondersteunt. De afneembare zijpanelen en veiligheidshekken zijn snel om te zetten naar welke zorgsituatie dan ook. Ze maken het ook aanzienlijk gemakkelijker om het bed te monteren.

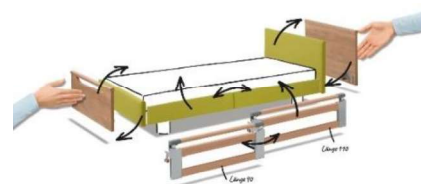

Opties en accessoires

- Houtdecor in havanna (onder voorbehoud van beschikbaarheid, langere levertermijn)
- Beklede hoofd- en voetpanelen en zijkanten
 - stof: rood, groen
 - kunstleder: wit, antraciet



Stof: rood



Stof: groen



Kunstleder: wit



Kunstleder: antraciet



Houtdecor: havanna

- Comfort ligvlak
- Bedverlenging
 - Wanneer er bij bestelling van het bed gekozen wordt voor een verlengde uitvoering, worden de veiligheidshekken en zijpanelen in lengte 110cm +110cm geleverd. Er dient bijgevolg enkel een ligvlakverlengstuk bijbesteld te worden (lengte 27cm).



Bestelnummers

BBRPAR-NM-4MF	Regia Partner – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – 2x ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen
BBRPAR-NMS-4MF	Regia Partner – 24V – met 4 Mobiflex veiligheidshekken – 2x ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen Beklede hoofd- en voetpanelen: kleur naar keuze
BBRPAR-NM-2MF	Regia Partner – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – 2x ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen
BBRPAR-NMS-2MF	Regia Partner – 24V – met 2 Mobiflex veiligheidshekken ah hoofdeinde – 2x ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze
BBRPAR-NM-HOTEL	Regia Partner – 24V – zonder veiligheidshekken – 2x ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen
BBRPAR-NMS-HOTEL	Regia Partner – 24V – zonder veiligheidshekken – 2x ligvlak 90x200cm – met Nobla mala panelen Beklede hoofd- en voetpanelen en zijpanelen: kleur naar keuze